

UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

O rampă pentru scaune cu rotile este un plan înclinat care se instalează pe lângă sau în locul scărilor. Rampele permit utilizatorilor de scaune cu rotile, precum și persoanelor care folosesc cărucioare, premergătoare sau alte produse cu roți, să acceseze mai ușor o clădire, o zonă cu trepte, vehicule cu roți sau să navigheze între zone de diferite înălțimi. Poate fi utilizată fie ca rampă de acces portabilă, fie fixă, în funcție de modelul pe care îl aveți.

ATENȚIE(!)

- În cazul unei probleme, NU utilizați produsul până când nu este reparat și contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele specificate în acest manual este interzisă.
- MOBIAC S.A. își declină orice răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea diferită de cea menționată în acest manual.
- MOBIAC S.A. își rezervă dreptul de a efectua modificări ale produsului și ale manualului următor fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți caracteristicile acestuia.
- Există posibilitatea unei abateri a dimensiunilor produselor în intervalul de ±3%.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Declarăm pe propria noastră responsabilitate că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt din Categoria de Risc Scăzut (Clasa de Risc I) și îndeplinesc cerințele Regulamentului European 745/2017 și, acolo unde este cazul, standardele și legislația menționate.

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ:

- NU utilizați acest produs sau orice echipament opțional disponibil fără a citi mai întâi și ați înțeles integral acest manual de utilizare. Dacă nu înțelegeți avertismentele, precauțiile sau instrucțiunile, contactați un profesionist din domeniul sănătății, un distribuitor sau personal tehnic înainte de a încerca să utilizați dispozitivul, în caz contrar putând rezulta vătămări corporale sau daune materiale.
- A se păstra produsul departe de sursele de căldură.
- Vă rugăm să păstrați acest formular pentru utilizare ulterioară.
- Fiți atenți când sunt copii în preajmă și NU lăsați copiii să se joace cu produsul.
- Este necesară întotdeauna o atenție deosebită acolo unde există piese mobile care pot provoca prinderea membrilor și rănirea acestora.
- Nu încercați să ridicați produsul ținând de nicio piesă de asamblare.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare.
- Permiteți rampa doar unei singure persoane sau persoane cu dizabilități la un moment dat.
- Folosiți rampa foarte încet. Nu conduceți o trotinetă sau un scaun cu rotile electric la viteză maximă, deoarece acest lucru poate provoca daune și/sau vătămări corporale.

ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE:

- Verificați dacă rama prezintă deteriorări pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului. Nu există crăpături sau rupturi în cadru.
- În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Verificați dacă produsul este asamblat corect și dacă toate șuruburile sunt fixate și strânse.
- Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea în deplină siguranță a produsului pentru persoane și obiecte.
- Asigurați-vă că rampa este deschisă și poziționată în siguranță înainte de fiecare utilizare.
- Asigurați-vă că încărcătura de pe rampă este aproximativ centrată între secțiunile din stânga și din dreapta. Nu vă aplecați peste margine în timpul utilizării.
- Rampa poate fi instalată permanent. Atașați rampa folosind cele două orificii din partea din față a rampei și elementele de fixare sau hardware-ul corespunzătoare, care nu sunt incluse în pachet.
- Folosiți cea mai mică pantă posibilă de urcare sau coborâre și nu depășiți panta recomandată de producătorul scaunului cu rotile.

PROTECȚIA MEDIULUI:

Dacă constatați că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu vă mai este util, luați în considerare protejarea mediului:

- Nu aruncați produsul împreună cu alte deșeuri municipale (aceasta este semnificația simbolului de reciclare).
- Contactați autoritățile municipale pentru a vă indica punctele unde puteți elimina produsul pentru reciclare.
- Prin eliminarea produsului care nu mai este util la punctul de reciclare corect, contribuiți la protejarea mediului și la reutilizarea materialelor din care este compus produsul dumneavoastră.

INFORMATII PRIVIND ÎNTREȚINEREA, CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTIA:

Pentru a asigura o utilizare sigură și un nivel adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare.

Utilizatorul trebuie să asigure integritatea structurală a produsului și a componentelor sale. Pentru procedurile de curățare și dezinfectare, urmați pașii de mai jos:

- Trebuie să purtați mănuși.
- Îndepărtați murdăria vizibilă înainte de a trece la o curățare mai detaliată.
- Folosiți apă sau detergent blând pentru procesul de curățare.
- Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
- NU lăsați produsul umed.
- Nu folosiți produse chimice de curățare pentru a curăța cadrul. Acest lucru poate cauza provoca deteriorarea suprafeței de acoperire a produsului.
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
- Protejați produsul de abraziuni, tăieturi și înțepături.
- Lubrifiere: produsul este conceput pentru o întreținere minimă. Cu toate acestea, verificați la fiecare șase luni luni de lubrifiere a pieselor mecanice în mișcare, acest lucru va asigura o durabilitate optimă.

RAPORT DE INCIDENT:

Orice incident grav care apare în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.

MONTAJ:

NOTĂ: Ilustrațiile de asamblare sunt cu titlu informativ pentru a facilita asamblarea și pot diferi de realitate. Produsul se livrează asamblat și gata de utilizare.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ:

O rampă pentru scaune cu rotile este un plan înclinat instalat pe lângă sau în locul scărilor. Rampele permit utilizatorilor de scaune cu rotile, precum și persoanelor care împing cărucioare, role, cărucioare sau alte produse cu roți, un acces mai facil la o clădire, la o zonă cu trepte, la vehicule cu roți sau la navigarea între zone de diferite înălțimi. Poate fi utilizată fie ca rampă de acces portabilă, fie fixă, în funcție de modelul pe care îl aveți.

AVERTISMENT (!)

- În caz de deteriorare sau funcționare defectuoasă a produsului, NU utilizați produsul și vă rugăm să contactați reprezentantul autorizat și instruit.
- Nu utilizați produsul în scopuri care nu sunt indicate în acest manual.
- MOBIAC SA își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe rezultate din utilizarea incorectă a acestui produs și din modificarea neautorizată a cadrului produsului.
- MOBIAC SA își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute în acest document pentru a îmbunătăți specificațiile produselor fără notificare prealabilă.
- Există o abatere de ± 3% pentru dimensiunile produselor.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Suntem singurii responsabili pentru declararea faptului că Dispozitivele Medicale menționate în această declarație sunt din Clasa de Risc Scăzut (Clasa I) și respectă cerințele Regulamentului European 745/2017 și, acolo unde este cazul, standardele și legislația la care se face referire.

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ:

- Dacă nu citiți acest manual de utilizare, este de preferat să nu utilizați acest produs sau o altă piesă disponibilă. Dacă nu înțelegeți modul de utilizare sau precauțiile, vă rugăm să contactați distribuitorul sau persoana tehnică competentă înainte de a utiliza produsul, deoarece acest lucru poate provoca daune.
- A se păstra produsul departe de sursele de căldură.
- Păstrați acest document pentru referințe viitoare.
- Fiți atenți când se află copii în apropiere și nu le permiteți să se joace cu produsul.
- Este necesară întotdeauna o atenție deosebită acolo unde există piese mobile care pot provoca prinderea membrilor și rănirea acestora.
- Nu încercați să ridicați produsul ținând de nicio piesă detașabilă.
- Nu utilizați produsul în alt scop decât cel prevăzut.
- Nu depășiți limita de greutate a sarcinii utile sigure.
- Permiteți unei singure persoane sau unui vehicul de mobilitate să utilizeze rampa de fiecare dată.
- Folosiți rampa doar foarte încet. Nu conduceți trotineta sau scaunul cu rotile electric la viteză maximă, deoarece acest lucru ar putea provoca daune și/sau vătămări corporale.

ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE:

- Verificați dacă rama este deteriorată pentru a garanta o utilizare în siguranță a produsului. (Nu există crăpături sau fracturi în ramă).
- În caz de deteriorare, nu utilizați produsul și contactați distribuitorul pentru instrucțiuni suplimentare.
- Verificați dacă produsul este asamblat corect și dacă toate șuruburile sunt fixate și bine înșurubate.
- Verificați întotdeauna starea de uzură a pieselor mecanice pentru a asigura utilizarea în siguranță absolută a produsului pentru persoane și obiecte.
- Asigurați-vă că rampa este pliată și poziționată în siguranță înainte de fiecare utilizare.
- Asigurați-vă că sarcina de pe rampă este aproximativ centrală între secțiunile stânga și dreapta. Nu vă aplecați peste margine în timpul utilizării.
- Rampa poate fi instalată permanent. Atașați rampa folosind cele două găuri pre-găurite în partea din față a rampei și elementele de fixare adecvate, care nu sunt incluse în ambalaj.
- Folosiți cea mai mică înclinație posibilă de urcare sau coborâre și nu depășiți înclinația propusă de producătorul scaunului cu rotile.

PROTECȚIA MEDIULUI:

Dacă într-o zi descoperiți că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau nu mai funcționează pentru dumneavoastră, luați în considerare protejarea mediului:

- Nu aruncați produsul împreună cu restul deșeurilor publice (aceasta este și semnificația semnului de reciclare afișat).
- Contactați autoritățile publice, care vă vor informa cu privire la centrele de reciclare la care trebuie eliminat produsul dumneavoastră.
- Eliminarea corectă a produsului dumneavoastră ajută la protejarea mediului, precum și la reciclarea componentelor produsului.

INFORMATII PRIVIND ÎNTREȚINEREA, CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTIA:

Pentru a garanta o utilizare sigură și un standard adecvat de igienă, utilizatorul trebuie să efectueze aceste proceduri înainte de fiecare utilizare.

Utilizatorul trebuie să se asigure de integritatea structurală a dispozitivului și a componentelor sale. Pentru procedurile de curățare și igienizare, urmați pașii de mai jos:

- Trebuie purtate mănuși.
- Îndepărtați murdăria evidentă înainte de a continua curățarea cât mai precisă.
- Folosiți apă sau detergent blând pentru procedura de curățare.
- Ștergeți cu o cârpă uscată și curată.
- NU lăsați produsul umed.
- Nu folosiți produse chimice de curățare pentru a curăța cadrul. Acest lucru ar putea deteriora suprafața produsului.
- Dacă trebuie să dezinfectați produsul, utilizați un dezinfectant obișnuit, ușor.
- Protejați articolul de zgârieturi, tăieturi și înțepături.
- Lubrifiere: produsul a fost conceput pentru o întreținere minimă? Cu toate acestea, verificați la fiecare șase luni lubrifierea pieselor mobile și mecanice, acest lucru ar asigura o durată optimă.

RAPORTARE INCIDENTE:

Orice incident grav care apare în legătură cu utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și unei autorități competente din statul membru în care locuiește utilizatorul și/sau pacientul.

ASAMBLARE:

NOTĂ: Ilustrațiile pentru asamblare sunt cu titlu informativ pentru a facilita asamblarea. Pot exista diferențe față de realitate. Produsul este asamblat și gata de utilizare.

0805401:

- 1) Deschidem partea principală a rampei astfel încât să fie dreaptă.
- 2) Aliniați secțiunea laterală a rampei, asigurându-vă că tăietura din această secțiune este în partea de jos a rampei. (Partea superioară a rampei este locul unde are cele două găuri)
- 3) Fixați secțiunile cadrului principal împreună folosind zăvorul de pe partea inferioară a rampei.
- 4) Repetați punctele 2 și 3 pentru cealaltă secțiune laterală.
- 5) Pentru pliere: Eliberați ambele încuietori de sub rampă.
- 6) Îndepărtați ambele secțiuni laterale. Acum puteți rula cadrul principal al rampei.

0805401:

- 1) **Intindeți** secțiunea principală a rampei astfel încât să fie dreaptă.
- 2) **Aliniați** secțiunea laterală a rampei, asigurându-vă că decupajul din această secțiune este în partea de jos a rampei (partea superioară a rampei este locul unde sunt perforate două găuri).
- 3) **Blocați** secțiunile împreună cu cadrul principal folosind zăvorul de pe partea inferioară a rampei.
- 4) **Repetati** punctele 2 și 3 pentru cealaltă secțiune laterală.
- 5) **Pentru pliere:** Eliberați ambele zăvoare de sub rampă.
- 6) **Îndepărtați** ambele secțiuni laterale.
Acum puteți rula cadrul rampei principale.

0805402 şı 0805403:

- 1) Transportați rampa în zona necesară folosind mânerul de transport.
- 2) Desfaceți rampa.
- 3) Poziționați rampa astfel încât partea superioară a acesteia să fie în punctul cel mai înalt.
(Partea superioară a rampei este locul unde are cele două găuri).
- 4) Partea superioară a rampei are o margine care permite o operare sigură și confortabilă.
- 5) Asigurați-vă că această margine este la același nivel cu treapta sau cu intrarea în mașină.

0805402 şı 0805403:

- 1) Transportați rampa în zona necesară folosind mânerul de transport.
- 2) **Desfaceți rampa.**
- 3) Poziționați rampa astfel încât partea superioară a acesteia să fie mai înaltă (partea superioară a rampei este locul unde sunt perforate două găuri).
- 4) Partea superioară a rampei are o margine pentru a permite o operare sigură și confortabilă.
- 5) Asigurați-vă că această margine este complet pe treaptă sau pe intrarea mașinii și la 90° față de obiect.

REF.:	GTIN-14	DESCRIERE	DESCRIERE EN
<u>0805400</u>	05213006904844	RAMPĂ PLIABILĂ	RAMPĂ TELESOPICĂ 7FT/ 213CM
<u>0805401</u>	05213006904851	RAMPĂ PLIABILĂ - CU ROLE	RAMPĂ DE URSE CU RULOU
<u>0805402</u>	05213006904868	RAMPĂ PLIABILĂ 91cm (VALIZĂ)	RAMPĂ PLIABILĂ 91 CM - VALIZĂ
<u>0805403</u>	05213006904875	RAMPĂ PLIABILĂ 152 cm (VALIZĂ)	RAMPĂ PLIABILĂ 152 CM - VALIZĂ

GARANȚIE:

Produsul beneficiază de o garanție de bună funcționare timp de doi (2) ani de la data achiziției. Garanția acoperă defectele din fabrică și NU acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea deficitară, modificarea, abuzul sau nerespectarea instrucțiunilor produsului. De asemenea, NU acoperă piesele de uzură și orice altceva care s-ar putea uza în timpul utilizării sau în timp.

De asemenea, nu sunt acoperite de garanție daunele sau defectele cauzate de: dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (unde este cazul) și companii de transport.

Nicio lucrare sau piesă nu este acoperită decât dacă a fost inspectată de un centru de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru inspecție sunt suportate de utilizator sau client sau de către comerciant.

GARANȚIE:

Produsul este garantat pentru o perioadă de doi (2) ani de la data achizitiei.

Garanția se aplică defectelor din fabrică și NU se aplică daunelor rezultate din utilizarea necorespunzătoare, întreținerea defectuoasă, modificarea, utilizarea excesivă sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare ale produsului.

De asemenea, NU SE aplică pe piesele care se pot uza în timpul utilizării sau în timp. Daunele sau defectele cauzate de dezastre naturale, întreținere sau reparații neautorizate, probleme de alimentare cu energie electrică (unde este cazul) și transportatori nu sunt acoperite de garanție.

Nicio piesă de service sau de schimb nu se aplică decât dacă a fost inspectată de un departament de service autorizat sau de producătorul produsului. Costurile de transport pentru bunurile aflate în garanție vor fi suportate de către utilizatorul final-client sau de către distribuitor.







FORMULAR DE GARANTIE:

DETALII CUMPĂRĂTOR:	
NUMELE COMPLET:	
DATA ACHIZIȚIEI:	
TELEFON:	
NUMĂR DE LOT SAU SERIE:	
DETALII DEALER	
MARCĂ	
ADRESĂ	
TELEFON	
	ȘTIMUL ȘI SEMNĂTURA MAGAZINULUI /

Interpretarea simbolurilor de pe eticheta de pe cutie sau din instrucțiunile de utilizare ale produsului

Descrierea simbolurilor care au fost imprimate pe etichetă, cutie principală și/sau manualul de utilizare

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ
READ THE INSTRUCTION FOR
USE

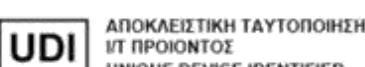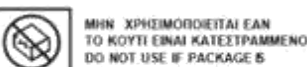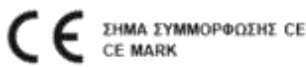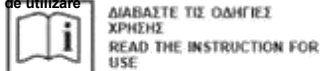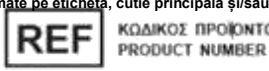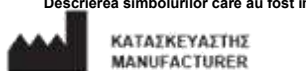

0805400:

- 1) Pentru a extinde rampa la lungimea completă, apăsați butonul și trageți încet partea cea mai îngustă a rampei, ținând în același timp cealaltă parte, până când se blochează în poziție.
- 2) Repetați acest lucru pentru cealaltă secțiune a rampei.
- 3) Această rampă NU POATE fi instalată permanent într-un singur loc

0805400:

- 1) Pentru a extinde rampa la lungimea completă, apăsați butonul și trageți încet de cea mai îngustă secțiune a rampei, ținând în același timp de cea mai lată secțiune, până când aceasta este blocată în poziție.
- 2) Repetați acest lucru pentru cealaltă secțiune a rampei.
- 3) Această rampă **NU POATE** fi instalată permanent.

		0805400	0805401
SCHELET	CADRU	ALUMINIU / ALUMINIU	ALUMINIU / ALUMINIU
LUNGIME	LUNGIME	120-213 cm	93 cm
ÎN STRĂINĂȚATE LĂȚIME- DESCHIDE	LĂȚIME COMPLETĂ	18,9 cm	76 cm
INTERIOR LĂȚIME FIECARE PIESE	LĂȚIMEA INTERIOARĂ A FIECARE PARTE	13 cm	-
ANTIDERAPANT ACOPERIRE	ANTIALUNECARE BANDĂ	DA / DA STANDARD	NU, E CA ȘI CUM ROL / NU, POATE FI IMPĂTURIT CA O ROLĂ
SARCINĂ MAXIMĂ	SARCINĂ MAXIMĂ	270 kg	270 kg
RAPORT Lungime ascendentă	ÎNĂLȚIME-LUNGIME RAPORT	PE LUNGIME DE 30 cm RAMPĂ VALIDĂ 5 cm ÎNĂLȚIME MAXIMĂ / ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A 5 cm PE RAMPĂ DE 30 cm	PE LUNGIME DE 30 cm RAMPĂ VALIDĂ 5 cm ÎNĂLȚIME MAXIMĂ / ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A 5 cm PE RAMPĂ DE 30 cm
ÎNĂLȚIME MAXIMĂ INCLINAȚIE	ÎNCLINARE MAXIMĂ ÎNĂLȚIME	35 cm	15,5 cm
CURĂȚARE – GREUTATE BRUTĂ	NET – BRUT GREUTATE	8,6 kg - 9,5 kg	6,8 kg - 7,8 kg

		0805402	0805403
SCHELET	CADRU	ALUMINIU / ALUMINIU	ALUMINIU / ALUMINIU
LUNGIME	LUNGIME	91 cm	152 cm
ÎN STRĂINĂTATE LĂȚIME- DESCHIDE	LĂȚIME COMPLETĂ	73 cm	73 cm
INTERIOR LĂȚIME FIECARE PIESE	LĂȚIMEA INTERIOARĂ A FIECARE PARTE	36 cm	36 cm
ANTIDERAPANT ACOPERIRE	ANTIALUNECARE BANDĂ	DA / DA STANDARD	DA / DA STANDARD
SARCINĂ MAXIMĂ	SARCINĂ MAXIMĂ	270 kg	270 kg
RAPORT Lungime ascendentă	ÎNĂLȚIME-LUNGIME RAPORT	PE LUNGIME DE 30 cm RAMPĂ VALIDĂ 5 cm ÎNĂLȚIME MAXIMĂ / ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A 5 cm PE RAMPĂ DE 30 cm	PE LUNGIME DE 30 cm RAMPĂ VALIDĂ 5 cm ÎNĂLȚIME MAXIMĂ / ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A 5 cm PE RAMPĂ DE 30 cm
ÎNĂLȚIME MAXIMĂ ÎNCLINAȚIE	ÎNCLINARE MAXIMĂ ÎNĂLȚIME	15 cm	25 cm
CURĂȚARE – GREUTATE BRUTĂ	NET – BRUT GREUTATE	7,3 kg - 8,6 kg	13 kg - 14 kg

