Instrucțiuni de utilizare
Scaun de duș




ref. 07639





ref. 07640


CE

max 150 kg
test 225 kg

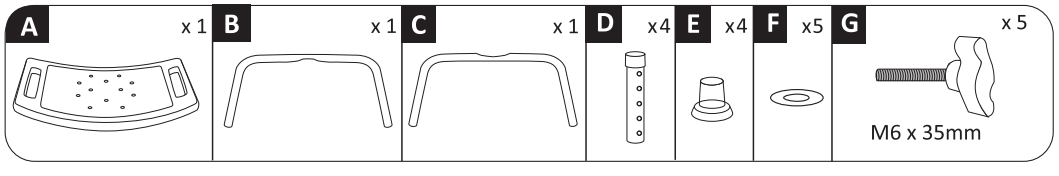

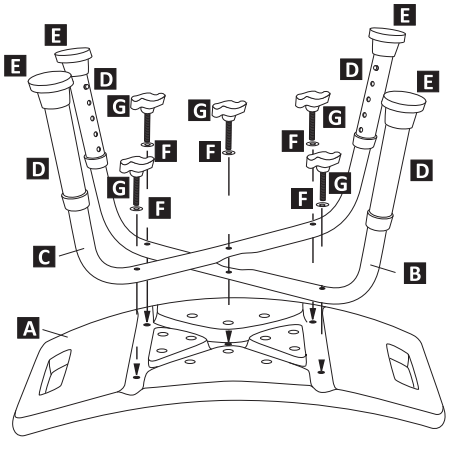

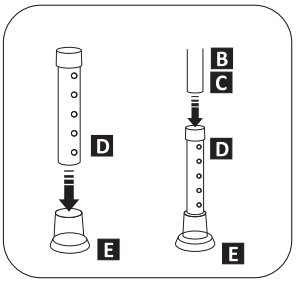

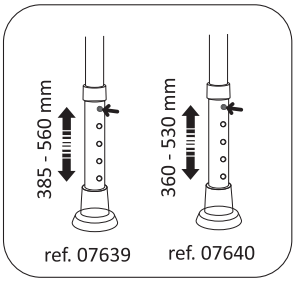

Garanție

Producătorul acordă o garanție de 5 ani pentru funcționarea corectă a produsului.
Garanția nu acoperă deteriorările rezultate din utilizarea necorespunzătoare, precum și deteriorarea stratului decorativ cauzată mecanic sau prin utilizarea de agenți de curățare abrazivi ori substanțe chimice agresive în timpul întreținerii produsului.

OBSERVAȚII PRIVIND UTILIZAREA – SIGURANȚĂ

Pentru utilizarea în siguranță a scaunelor (scaune și taburete) este necesar să:

• Verificați structura scaunului (dacă produsul este complet, nu este deteriorat și dacă structura cadrului nu este avariată).
• Verificați eventualele deteriorări ale elementelor din plastic (șezut, spătar).
• Verificați reglarea corectă a înălțimii picioarelor – utilizarea scaunului este permisă doar atunci când toate picioarele sunt reglate la aceeași înălțime.
• Verificați montarea corectă și dacă nu există deteriorări ale elementelor antiderapante (de pe toate picioarele produsului).

Pentru a evita rănirile și posibilele accidente:

• Utilizați scaunul doar atunci când este montat corect, în conformitate cu instrucțiunile, iar toate elementele sunt fixate permanent de cadru.
• Verificați starea tehnică a scaunului înainte de fiecare utilizare (șezut, spătar, tampoane din cauciuc, structura, montajul corect și strângerea șuruburilor).
• Utilizați produsul doar pe o suprafață plană, dură și stabilă, pentru a preveni deplasarea scaunului în momentul așezării.
• Acordați o atenție deosebită atunci când folosiți scaunul pe suprafețe umede sau alunecoase, chiar dacă este echipat cu picioare antiderapante.
• Persoanele cu dizabilități trebuie asistate atunci când folosesc scaunul.

Este interzis:

• Să săriți pe sau de pe scaun/taburet.
• Să transportați scaunul/taburetul împreună cu utilizatorul.
• Să stați cu picioarele pe orice element al scaunului/taburetului, inclusiv pe șezut.
• Să depășiți sarcina maximă admisă de producător.

Recomandare

Pentru a crește siguranța utilizării, se recomandă acoperirea suprafețelor alunecoase (de exemplu în zona piscinei sau în cabina de duș) cu covorașe antiderapante.

În cazul:

• apariției oricărei deteriorări;
• lipsei unor componente necesare;
• instabilității produsului montat corect.

Luați legătura cu **TESA MED SOLUTIONS SRL**.

contact@tesamedical.ro
0371 71 80 80