ÎNĂLŢĂTOR WC

Cod produs: CMI-7060D-4 TALO, CMI-7060D-6 ELIN


Înălțătorul pentru WC este fabricat din plastic rezistent la dezinfectanți. Produsul are un design ergonomic, este compatibil cu majoritatea vaselor de toaletă standard și este prevăzut cu capac pentru a preveni răspândirea mirosurilor neplăcute în încăpere.

Produsul este destinat persoanelor cu mobilitate redusă, facilitând așezarea și ridicarea de pe vasul de toaletă. Este recomandat persoanelor care au dificultăți în a se așeza sau a se ridica în siguranță.

Pentru montarea înălțătorului:

1. Așezați înălțătorul pe vasul toaletei.
2. Poziționați clemele laterale pe marginea vasului.
3. Strângeți șuruburile de fixare până când produsul este fixat ferm.
4. Verificați stabilitatea produsului înainte de utilizare.

Date tehnice CMI-7060D-4:

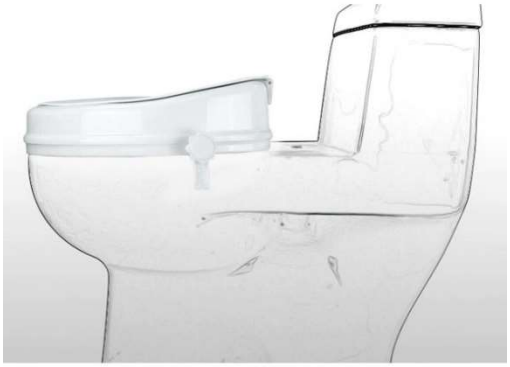

Lățimea înălțătorului: 35 cm

Adâncimea înălțătorului: 40 cm

Masa produsului: 1,5 kg

Greutatea maximă admisă: 130 kg

Înălțimea înălțătorului: 10 cm

Date tehnice CMI-7060D-6:



Lățimea înălțătorului: 35 cm

Adâncimea înălțătorului: 40 cm

Masa produsului: 2 kg

Greutatea maximă admisă: 130 kg

Înălțimea înălțătorului: 15 cm

CERTIFICAT DE GARANŢIE

TERMEN DE GARANŢIE : 12 luni
PRODUS: SERIE/LOT:
FACTURA/BON: …… DIN DATA: ……..
CUMPĂRĂTOR: …… .....
ADRESA:…….....……

Prezentul certificat de garanție a fost întocmit conform OG 21/1992 și OUG 140/2021 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Garanția produsului este de 12 luni de la data cumpărării. În această perioadă consumatorul beneficiază de repararea sau înlocuirea gratuită a produsului, în cazul în care se constată un defect de fabricație.

În cazul eventualelor reclamații, produsul va fi prezentat la magazinul (farmacia) de unde a fost cumpărat.

Termenul de soluționare a reclamațiilor este de 15 zile.

În cazul defectării produsului, cumpărătorul îl va duce la magazinul de unde l-a cumpărat, solicitând repararea sau înlocuirea acestuia.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este însoțit de certificatul de garanție și bonul fiscal sau factura de achiziție, completate corespunzător, lizibile, fără modificări, semnate și/sau ștampilate.

Nu se acordă garanție amortizoarelor din cauciuc (consumabile).

Durata termenului de garanție se prelungește cu perioada cuprinsă între data la care cumpărătorul a reclamat defectarea produsului și data repunerii acestuia în funcțiune.

Cumpărătorul își pierde dreptul la garanție dacă produsul a fost transportat, depozitat, manipulat sau utilizat necorespunzător, dacă produsul a fost modificat, a suferit intervenții neautorizate sau a fost utilizat fără respectarea instrucțiunilor.

Prezentul certificat de garanție este valabil numai însoțit de bonul fiscal sau factura de achiziție.

Durata medie de utilizare a produsului este de 3 ani.