

SPECIFICAȚII

Model	Înălțime ridicare	Sarcină maximă	Greutatea produsului
MIVO SC7060H	60/100/140mm	300lbs/136kg	5.1kg±3 %

- Compatibilitate cu toaleta: Lățime interioară vas toaletă ≥ 240 mm, lățime exterioară vas toaletă ≤ 350 mm, adâncime vas toaletă: 430 mm – 470 mm
- Verificați dimensiunile toaletei înainte de a alege înălțătorul pentru toaletă.

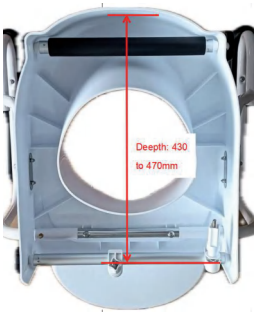

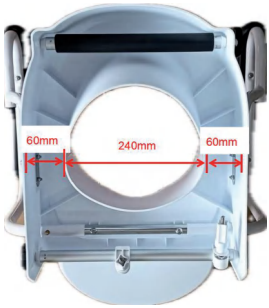

CONȚINUTUL PACHETULUI

No.	Denumire	Imagine	**SC7060H**
1	Înălțător pentru toaletă cu capac		1
2	Brațe de sprijin		2

3	Manual		1

AVERTISMENTE

Asigurați-vă întotdeauna că scaunul este montat corect și fixat în siguranță înainte de utilizare.
Verificați ca sistemul de fixare să fie bine strâns în permanență, astfel încât scaunul să fie stabil pe vasul toaletei.
Persoanele cu mobilitate redusă trebuie supravegheate sau asistate atunci când utilizează produsul.
Înălțătorul pentru toaletă nu trebuie utilizat dacă se depășește sarcina maximă admisă.
Greutatea utilizatorului trebuie poziționată în centrul scaunului, nu prea în față și nici prea în lateral, deoarece există risc de răsturnare.
Produsul este proiectat pentru majoritatea tipurilor de toalete, însă nu este compatibil cu toate modelele.
Asigurați-vă că este montat corect, se potrivește corespunzător și este stabil înainte de utilizare.
Pentru modelele cu brațe de sprijin:
Brațele sunt concepute pentru a ajuta la așezare și ridicare. Nu vă sprijiniți întreaga greutate pe brațe în timpul transferului, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea produsului sau la risc de accidentare.
Dacă modelul toaletei dumneavoastră nu permite montarea corectă sau fixarea sigură a produsului, se recomandă întreruperea utilizării.
Verificați periodic dacă produsul este montat corect și dacă toate componentele sunt fixate.
Dacă observați semne de uzură, deteriorare sau lipsa unor piese, opriți utilizarea.
Nu demontați produsul dacă nu este necesar, deoarece acest lucru poate reduce durata de viață a componentelor.
Nu modificați produsul decât dacă acest lucru este specificat în manual.
Manipulați produsul cu atenție în timpul montării și utilizării.
Evitați temperaturile ridicate sau flăcările deschise.
Dacă apare o reacție alergică, întrerupeți utilizarea și consultați un medic.
Înainte de utilizare, consultați medicul sau personalul medical pentru a confirma că produsul este potrivit pentru nevoile dumneavoastră.
Instrucțiunile de mai jos nu înlocuiesc recomandările medicale.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

1. **Demontarea capacului existent**

Scoateți capacul actual al toaletei.

De obicei, acesta este fixat cu două șuruburi și piulițe în partea din spate a vasului. Desfiletați și îndepărtați piulițele lungi din plastic aflate în partea din spate a înălțătorului.






2. Poziționarea pe vasul toaletei


Așezați înălțătorul pe vasul toaletei, introducând șuruburile de fixare prin găurile existente ale toaletei.

Asigurați-vă că produsul este centrat corect pe vasul toaletei.

3. Reglarea poziției șuruburilor


Poziția șuruburilor de fixare poate fi ajustată pentru a se potrivi diferitelor modele de toalete. Pentru reglare, glisați șuruburile de-a lungul barei din spate până când obțineți distanța corectă.

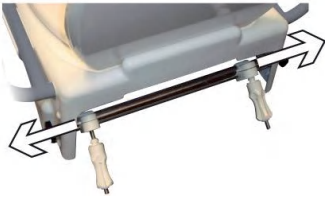

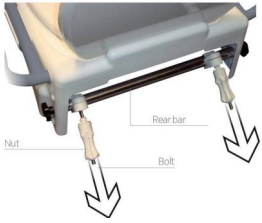

Piulițele trebuie să fie ușor slăbite, pentru ca șuruburile să poată glisa liber pe bară.

4. Montați din nou cele două piulițe lungi din plastic pe șuruburi și strângeți-le ferm. Verificați ca înălțătorul să fie fixat solid pe vasul toaletei înainte de utilizare.

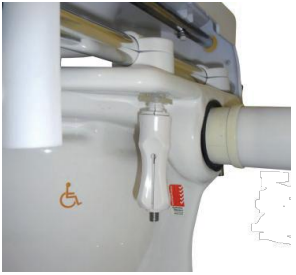

REGLAREA ÎNĂLȚIMII SCAUNULUI

Înălțătorul poate fi reglat în 3 poziții de înălțime, adăugând: 50 mm, 100 mm, 150 mm. Înălțimea poate fi reglată înainte sau după instalare. Dacă reglarea se face după instalare, aveți grijă să nu scăpați componente în interiorul vasului toaletei.



MONTAREA BRAȚELOR DE SPRIJIN

Înălțătorul poate fi utilizat cu sau fără brațe de sprijin.
Se poate monta un singur braț sau ambele, în funcție de utilizator și de spațiul din baie. Fiecare braț este fixat cu un buton metalic de blocare.
Pentru montare:

1. Apăsați butonul de blocare situat sub cadrul brațului.

2. Introduceți brațul în orificiul lateral al scaunului.
3. Verificați că brațul este fixat și stabil înainte de utilizare.



ÎNTREȚINERE

Curățare
Curățarea regulată este recomandată.
Folosiți:
- detergent neabraziv
- apă caldă
După curățare, ștergeți produsul cu o cârpă moale.
Nu utilizați materiale abrazive, deoarece pot deteriora suprafața.

Curățare intensivă
Pentru murdărie mai persistentă:
- folosiți o soluție diluată de înălbitor
- clătiți bine
- ștergeți cu o cârpă curată

Verificați regulat:
șuruburile de fixare
stabilitatea produsului pe vasul toaletei
eventuale semne de coroziune, fisuri sau uzură

Important

Nu utilizați apă cu temperatură mai mare de 80°C.
Nu utilizați aparat de spălat cu presiune.
Nu utilizați curățare cu abur.
Nu utilizați substanțe abrazive sau perii metalice, deoarece pot deteriora produsul.