

Cadru de mers fix


MANUALUL UTILIZATORULUI

1. Conținut pachet


Tub ① : 2buc

Tub ② : 1buc


Tub ③ : 1buc

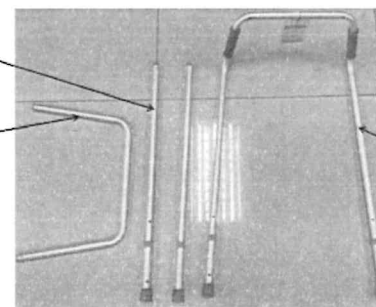



2. Listă accesorii

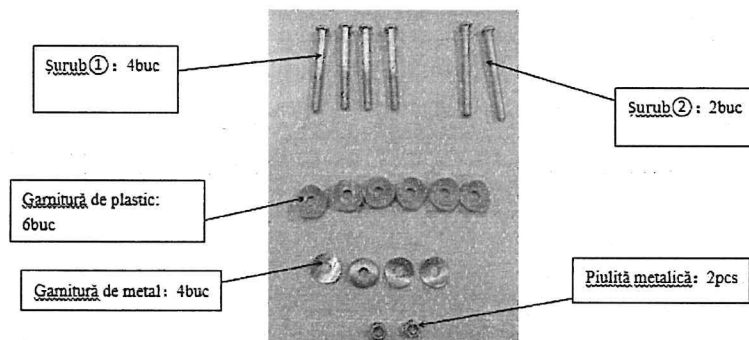


3. Mod de instalare

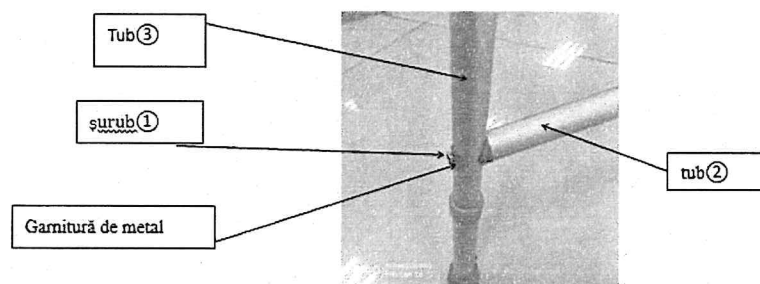

(1) Fiți atenți la direcția în care este pusă garniture de plastic.

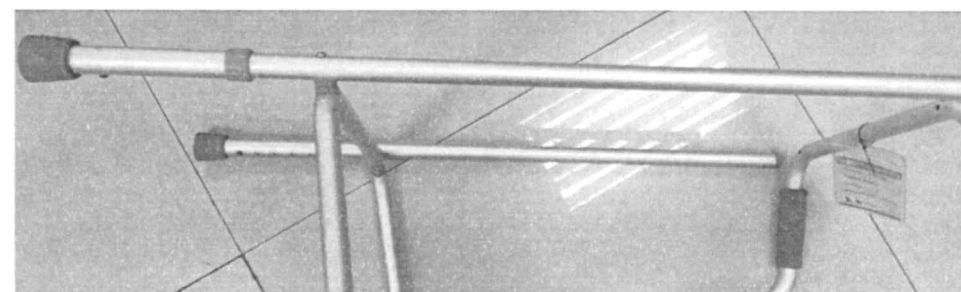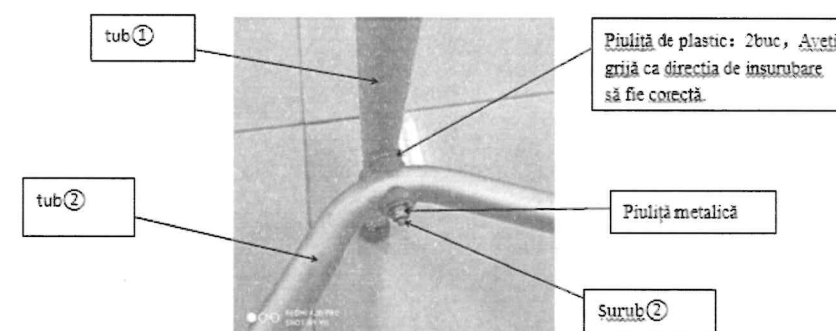


(2) Vă rugăm să rețineți că nu trebuie să strângeți mai întâi șuruburile, iar laturile stânga și dreapta ar trebui să fie simetrice în timpul instalării.

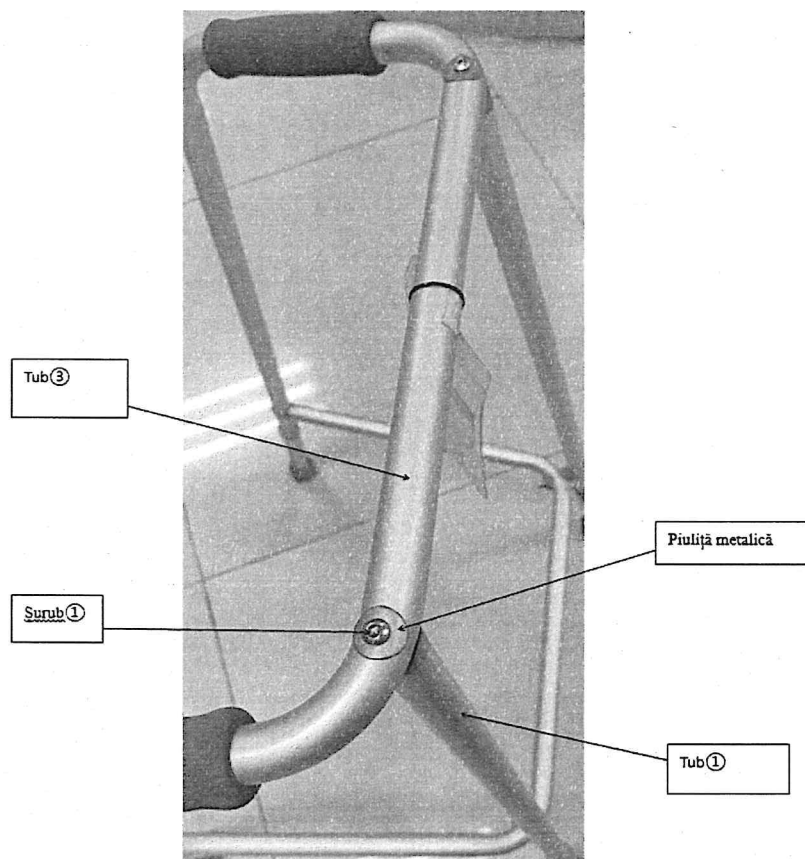

(3) Metoda de instalare pe laturile stânga și dreapta este aceeași și, în cele din urmă, strângeți toate șuruburile.

4. Instalarea este completă, ca în imaginile de mai jos.

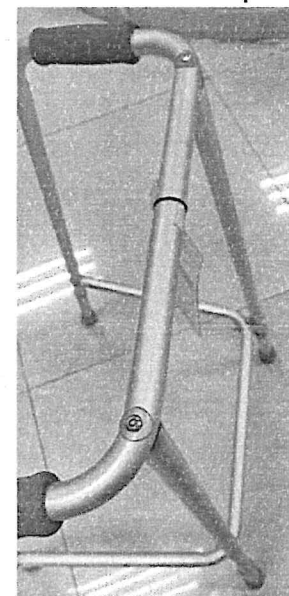

KY917L

Producător:

Foshan Kaiyang Medical Equipment Co., Ltd.
Foshan, Guangdong, China

Importator:

S.C. MED TEHNICA S.R.L
Adresa: Craiova, Str. Calea Unirii, Nr. 91, Dolj, România
Cod Poștal: 200345
Tel.: 0351 179 402
Fax: 0351 179 661
Web: www.med-tehnica.ro
Email: office@medtehnica.ro