

Bactiguard - Protectie contra infectiilor

Cateter Foley

Pentru prevenirea infectiilor in unitatile sanitare



Cresterea sigurantei pacientului prin tehnologie unica

Infectiile tractului urinar, asociate cu cateterele (CAUTI) au o contributie majora la infectiile din unitatile sanitare (HAI)¹.

Aceste infectii pot genera complicatii grave, precum urosepsia, care cresc suferinta pacientului, mortalitatea si costurile sanitare².

In plus, multe din aceste infectii sunt tratate cu antibiotice, crescand riscul aparitiei si raspandirii microbilor multirezistenti. OMS estimeaza ca rezistenta antimicrobiana este un fenomen atat de grav, incat ameninta cuceririle medicinei moderne³.

Cateterul BIP Foley este o sonda-cateter urinara, prevazuta cu invelisul Bactiguard®, fabricat din latex.


Tehnologia Bactiguard® a fost utilizata cu succes, incepand din 1995, pentru prevenirea HAI in SUA, Marea Britanie si Japonia, dar si in alte state.

Avantajele Bactiguard®

In stransa colaborare cu prestatorii de servicii medicale, tehnologia unica si experienta firmei Bactiguard ofera solutii care reduc rapid si eficient riscul infectiilor, cu urmatoarele avantaje:

- ✓ Scaderea costurilor sanitare
- ✓ Reducerea utilizarii antibioticelor
- ✓ Cresterea sigurantei pacientului

Infectii contactate in spital *

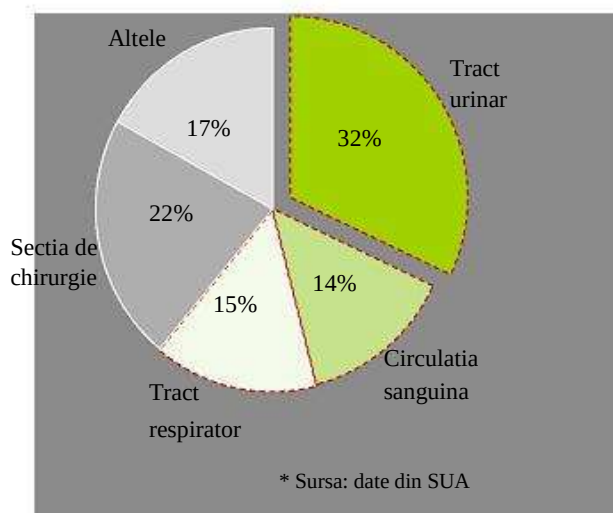

Utilizare

Cateterul BIP Foley este utilizat pentru drenarea si irigarea vezicii sau pentru colectarea si masurarea urinei pacientului. Cateterul poate fi utilizat prin uretra sau suprapubian.

Material

Cateterul BIP Foley este un cateter cu invelis Bactiguard® din latex. De asemenea, este prevazut cu un invelis hidrogel care faciliteaza introducerea si extragerea cateterului. Hidrogelul reduce frictiunea si lezarea uretrei de catre materialul cateterului.

BIP – Protectia antiinfectioasa Bactiguard

Tehnologia Bactiguard de protectie

antiinfectioasa are la baza aplicarea unui invelis extrem de subtire din metal nobil, format din aur, argint si paladium, la dispozitivele medicale. Invelisul Bactiguard® adera ferm la suprafata dispozitivului si reduce aderenta si proliferarea microbilor. Aceasta se realizeaza fara efecte farmacologice sau toxice. Solutia este unica. Este eficienta si, totodata, biocompatibila, protejeaza tesuturile si creste siguranta pacientului. Astfel, protectia antiinfectioasa Bactiguard este un factor important in prevenirea HAI si reduce utilizarea antibioticelor.

Invelisul Bactiguard®

– efacitate dovedita

Produsele cu invelis Bactiguard® au fost utilizate in aproximativ 40 de studii clinice si evaluari (1986–2014), asupra a peste 100,000 de pacienti din opt state.

Cateterul BIP Foley au demonstrat ca pot reduce semnificativ incidenta bacteriuriei si studiile efectuate demonstreaza ca infectiile simptomatice ale tractului urinar si utilizarea de antibiotice pot fi reduse

cu ~50% si, respectiv, 60%, prin utilizarea cateterelor cu invelis Bactiguard®^{4,5,6}. In prezent, mai mult de 130

de milioane de catetere urinare cu invelis Bactiguard® au fost vandute si utilizate pe pacienti, fara a fi semnalate efecte adverse ale invelisului. De asemenea, studiile demonstreaza ca invelisul nu creste rezistenta antimicrobiana^{6,7}. Cateterul BIP Foley si-a dovedit efacitatea de a reduce aderenta microbiana la dispozitiv cu peste

Bibliografie

1. Kleven RM et al, Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160-6
2. Kalra OP et al, J Glob Infect Dis. 2009 Jan;1(1):57-63
3. Antimicrobial resistance, Global report on surveillance, WHO, 2014
4. Schumm K et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2.Art. No.: CD004013.

99 de procente in cadrul studiilor microbiologice in vitro, cu tulpini izolate, cu relevanta clinica⁸.

Mediul ambiant

Invelisul Bactiguard® nu polueaza mediul ambiant si nu necesita proceduri speciale de manipulare, utilizare sau gestionare a deseurilor, acestea din urma urmand a fi evacuate similar cu cele ale produselor fara invelis.

5. Stenzelius K et al., Scand J Urol Nephrol. 2011 Sep;45(4):258-64.
6. Lederer JW, et al., J WOCN 2014; 41(5):1-8
7. Rupp MD, et al., Am J Infect Control. 2004 Dec;32(8):445-50
8. Data on file

Gama produselor Cateter BIP Foley

Numarul articolului	Articol	Dimensiuni (Fr/Ch)	Vol.balon. (ml/cc)	Lungime (cm)
111080310	Dublu sens Pediatric	8	5	30
111100310	Dublu sens Pediatric	10	5	30
111120510	Dublu sens Standard	12 10 40		
111140510	Dublu sens Standard	14 10 40		
111160510	Dublu sens Standard	16 10 40		
111180510	Dublu sens Standard	18 10 40		
111200510	Dublu sens Standard	20 10 40		
111220510	Dublu sens Standard	22 10 40		
111240510	Dublu sens Standard	24 10 40		
111260510	Dublu sens Standard	26 10 40		
111280510	Dublu sens Standard	28 10 40		
111300510	Dublu sens Standard	30 10 40		
111123010	Dublu sens Standard	12 30 40		
111143010	Dublu sens Standard	14 30 40		
111163010	Dublu sens Standard	16 30 40		
111183010	Dublu sens Standard	18 30 40		
111203010	Dublu sens Standard	20 30 40		
111223010	Dublu sens Standard	22 30 40		
111243010	Dublu sens Standard	24 30 40		
111263010	Dublu sens Standard	26 30 40		
111283010	Dublu sens Standard	28 30 40		
111303010	Dublu sens Standard	30 30 40		
112163010	Triplu sens Standard	16 30 40		
112183010	Triplu sens Standard	18 30 40		
112203010	Triplu sens Standard	20 30 40		
112223010	Triplu sens Standard	22 30 40		
112243010	Triplu sens Standard	24 30 40		
112263010	Triplu sens Standard	26 30 40		

Produsele au marcajul CE conform Directivei pentru dispozitive medicale 93/42/CEE

Pachet Departament



CE 0344

- Sterilizare si depozitare: consultati instructiunile de pe ambalaj.
- Pachet Departament = 10 bucati
Pachet Transport = 10×10 bucati.
- Dimensiuni Pachet Departament (10×10 st) L×H×l: 515×90×45 mm